

Fergus



# Suturas Especiales

**PRECISIÓN Y ALTA RESISTENCIA  
EN PROCEDIMIENTOS ORTOPÉDICOS**

# CordFit

Las **suturas tipo cuerda CordFit** cuentan con una tecnología distintiva de trenzado y una **gran resistencia a la tracción**, garantizando un excelente desempeño biomecánico para fijaciones de tejido blando en cirugías ortopédicas.

- Longitud total de las suturas: 38"
- Material de las suturas: multifilamento de UHMWPE

## CordFit with Tapered Needle

Cuenta con una **sutura tipo cuerda #2**, y una **aguja medio círculo**, ideal para preparaciones de injerto y sutura de ligamentos y tendones en cirugías ortopédicas.

- Disponible en color azul

### ● Resistencia

El grafado de la sutura CordFit #2 with Tapered Needle es de alta resistencia y soporta cargas de 43 N en promedio.<sup>1</sup>

### ● Fluidéz y precisión

La aguja de acero inoxidable es siliconada, de sección circular, y cuenta con una punta cónica que permite un paso suave y preciso por el tejido.




1. Definido por ensayos internos según US Pharmacopeia

## CordFit Stiff

La sutura CordFit Stiff es una **sutura #2 con extremo endurecido y tubo protector de polipropileno de 355 mm de longitud**. Este producto es recomendado para recuperar suturas desde el interior articular hacia el exterior de un túnel óseo.

- Disponible en color azul
- **Extremo endurecido**  
Simplifica el paso de la sutura por el tubo protector.
- **Más precisión, menos tiempo**  
Su morfología facilita procedimientos tales como la reparación de raíz meniscal y la reconstrucción de ligamento cruzado anterior y/o posterior con técnica all-inside.

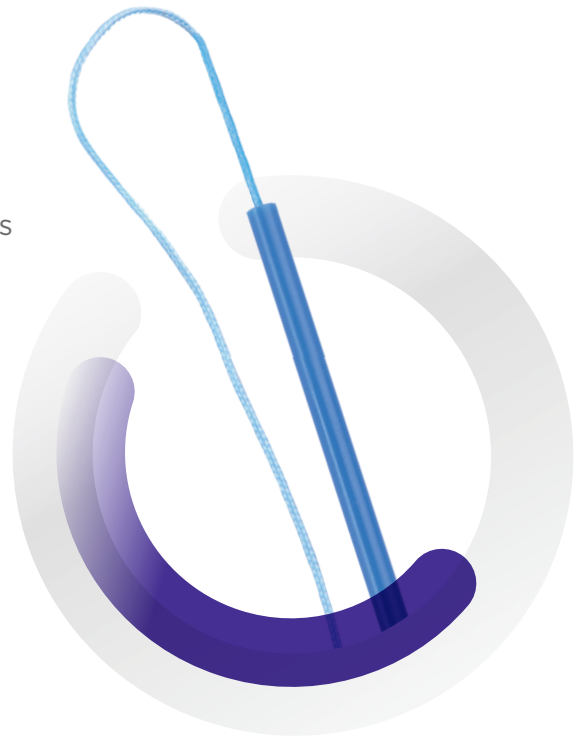

## CordFit Infinity

Cuenta con **una sutura en loop #2 y una aguja recta de acero inoxidable de 70 mm de longitud**, para la preparación de distintos tipos de injerto.

- Disponible en color blanco-azul
- **Resistencia**  
Su grafado soporta cargas de 43 N en promedio. Además, la resistencia del loop de sutura es mayor a 470 N.<sup>2</sup>
- **Pasaje seguro**  
La aguja siliconada de sección circular permite un pasaje suave evitando el desgarro de tejidos.



Todas las suturas son fabricadas con polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) de gran resistencia para brindar seguridad en los procedimientos quirúrgicos.



## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

| Código      | Descripción  |
|-------------|--|
| FG-SU031102 | Sutura CordFit with Tapered Needle #2 de UHMWPE, azul, con aguja ½ C       |
| FG-SU021102 | Sutura CordFit Stiff #2 de UHMWPE, azul, con extremo endurecido            |
| FG-SU040102 | Sutura CordFit Infinity #2 de UHMWPE, blanca-azul, en loop con aguja recta |