

Fergus



Suturas Especiales

**PRECISIÓN Y ALTA RESISTENCIA
EN PROCEDIMIENTOS ORTOPÉDICOS**

CordFit Meniscal Repair

Posee una **sutura tipo cuerda #2-0 con dos agujas rectas** para reparaciones meniscales mediante técnica inside-out, accediendo principalmente al cuerno anterior y al cuerpo del menisco.

- Disponible en color azul

Flexibilidad y resistencia

Sus dos agujas rectas de 320 mm de largo y 0,73 mm de diámetro, fabricadas en acero inoxidable otorgan máxima flexibilidad. Además, cuenta con un grafado de alta resistencia, que soporta cargas de más de 20 N.¹


Pasaje sutil

Las agujas con punta diamante son ideales para perforar el menisco sin desgarrarlo. A su vez, su cubierta siliconada permite un pasaje suave a través del tejido.

Instrumental asociado

Estas agujas se utilizan en conjunto con camisas de diferentes angulaciones, 25° y 65°, que permiten direccionar su pasaje a las zonas a reparar.

Las camisas meniscales cuentan con **punta roma**, que evitan daños en el menisco durante el procedimiento.

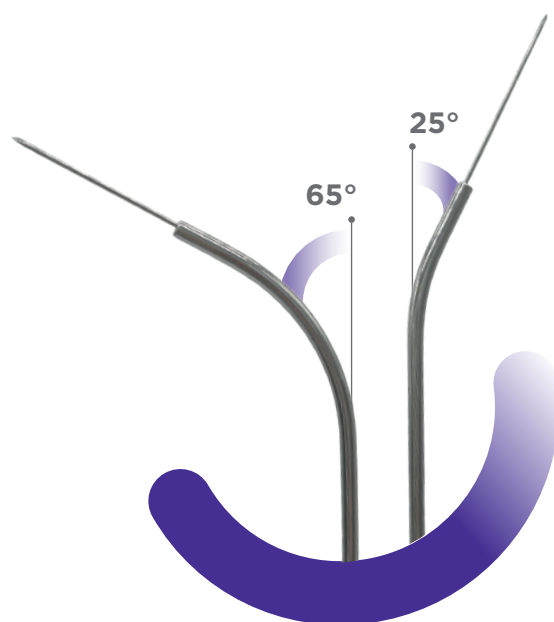

1. Definido por ensayos internos según US Pharmacopeia

CordFit with Tapered Needle

Cuenta con una **sutura tipo cuerda #2**, y una **aguja medio círculo**, ideal para preparaciones de injerto y sutura de ligamentos y tendones en cirugías ortopédicas.

- Disponible en color azul

● Resistencia

El grafado de la sutura CordFit #2 with Tapered Needle es de alta resistencia y soporta cargas de más de 24 N.¹

● Fluidez y precisión

La aguja de acero inoxidable es siliconada, de sección circular, y cuenta con una punta cónica que permite un paso suave y preciso por el tejido.



CordFit Infinity

Cuenta con **una sutura en loop #2** y una **aguja recta de acero inoxidable de 70 mm de longitud**, para la preparación de distintos tipos de injerto.

- Disponible en color blanco-azul

● Resistencia

Su grafado soporta cargas de más de 24 N. Además, la resistencia del loop de sutura es mayor a 372 N.²

● Pasaje seguro

La aguja siliconada de sección circular permite un pasaje suave evitando el desgarro de tejidos.



CordFit Stiff

Sutura #2 con extremo endurecido y tubo protector de polipropileno de 355 mm de longitud. Este producto es recomendado para recuperar suturas desde el interior articular hacia el exterior de un túnel óseo.

- Disponible en color azul



- **Extremo endurecido**
Simplifica el paso de la sutura por el tubo protector.
- **Más precisión, menos tiempo**
Su morfología facilita procedimientos tales como la reparación de raíz meniscal y la reconstrucción de ligamento cruzado anterior y/o posterior con técnica all-inside.

Las **suturas tipo cuerda CordFit multifilamento de UHMWPE** de Fergus poseen una longitud total de 38”.

CUENTAN CON UNA **GRAN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN**,
GARANTIZANDO UN EXCELENTE DESEMPEÑO
EN CIRUGÍAS ORTOPÉDICAS.

Todas las suturas son fabricadas con polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) de gran resistencia para brindar seguridad en los procedimientos quirúrgicos.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Código	Descripción
FG-SU061120	Sutura CordFit Meniscal Repair #2-0 de UHMWPE, azul, con dos agujas
FG-CN313100	Aguja meniscal de acero inoxidable con loop de nitinol
FG-IN590025	Camisa para reparación meniscal con punta inclinada 25°
FG-IN590065	Camisa para reparación meniscal con punta inclinada 65°
FG-SU040102	Sutura CordFit Infinity #2 de UHMWPE, blanca-azul, en loop con aguja recta
FG-SU021102	Sutura CordFit Stiff #2 de UHMWPE, azul, con extremo endurecido
FG-SU031102	Sutura CordFit with Tapered Needle #2 de UHMWPE, azul, con aguja 1/2 C

BRO-0010 (03) / ABR-2025